

# DISPOSAFE

## CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO

### DESCRIPCION:

El catéter endovenoso periférico es un producto en forma de tubo, generalmente largo, delgado y flexible que se introduce en una vía venosa periférica y/o arterial para la administración líquidos intravenoso y medicamentos para tratamientos en el sistema circulatorio humano.



### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

- \* Material biocompatible con todo tipo de vena
- \* Uso clínico hospitalario que no interactúe con las soluciones a transfundir
- \* Con tapa de control de retorno con filtro
- \* Con línea radiopaca
- \* Permite una duración prolongada de 72 horas (03 días) sin causar daño en las venas (flebitis)
- \* Constituido por un catéter, una aguja (introduccion-guia) y un protector adaptables entre si cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
- \* Condición biológicas: Atóxicos, apirogenos, estéril hipoalergénicos
- \* Aguja de acero quirúrgico tribiselado que permite la fácil canalización del catéter al primer intento y evitar la reutilización
- \* Permite puncion atraumatica que esta unido a la base pabellón
- \* Esterilizado con oxido de etileno de particulas extrañas o rebabas
- \* El catéter no debe formar acodaduras, manteniendo la permeabilidad del lumen durante su uso.
- \* El tamaño (longitud) del catéter no debe cubrir el área útil del bisel de la aguja en su posición basal (inicial) al momento de la venocanulacion.

### CERTIFICACION / STANDART

- \* ISO 13485-2016
- \* ISO 8670-2
- \* ISO 10993-5
- \* ISO 10993-10
- \* USP - VIGENTE

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

#### PRECAUCIONES:

- \* Este producto solo debe ser utilizado solamente por un profesional de salud calificado.
- \* El producto es estéril, no pirogénico y no tóxico si el empaque no se abre ni se daña.
- \* Para un solo uso, desechar después de usar no reciclar limpiar o reesterilizar.
- \* Utilizar el producto inmediatamente después de abrir el empaque individual.

### ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura menor a 30° C.

### CONDICION BIOLOGICA:

Estéril.

### VIDA UTIL:


5 años, desde la fecha de fabricación.

## COLORES Y DIMENSIONES:

Medida	Color	Largo del catéter (mm)	Largo del catéter (")
18 G	Verde	32mm	1¼
20 G	Rosado	32mm	1¼
22 G	Azul	25mm	1
24 G	Amarillo	19mm	¾



## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

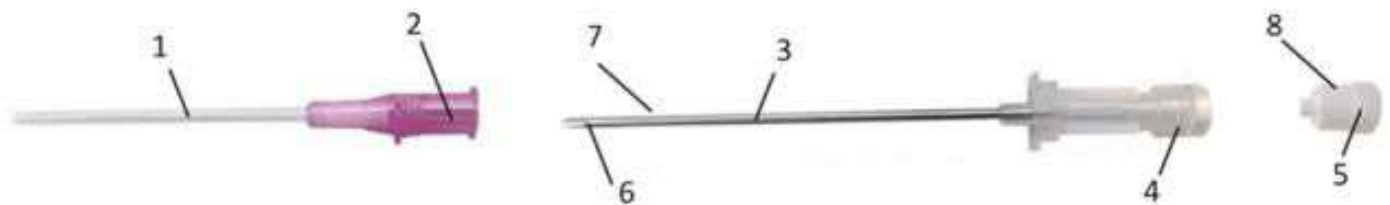

- 1 Tubo de catéter
- 2 Cubo del catéter
- 3 Tubo de la aguja
- 4 Tubo de la aguja
- 5 Montaje de la apertura
- 6 Talón de ángulo oblicuo
- 7 Unidad del catéter
- 8 Filtro

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

- \* Empaque individual tipo blister x 1 unidad de catéter
- \* Garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- \* Fácil de abrir
- \* Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- \* Caja x 100 unidades con rotulado
- \* Caja de cartón x 1000 unidades

### Contacto E-mail:

ventas@houseperumed.com  
gerencia@houseperumed.com  
www.houseperumed.com

Cel.: 945870065